

mediken

電動鼻用洗浄器ME107

取扱説明書

届出番号：13B2X10479302037



このたびは、メディケン製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。



LINE公式アカウントを今すぐ友だち追加
☞お気軽にお問い合わせください

■製品のお問い合わせ
■別売品や消耗品のご注文

■修理のご依頼
■初期不良

安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

・ 絵表示の例 ・

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

この取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

	● 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因になります。
	● 本体はIP22防水程度で、本体に水につけたり、かけたり、洗いたない。 ショート・感電のおそれがあります。
	● 充電前に、充電口に水がないように確認する。 充電口に水がありましたら、短絡（ショート）の恐れがあります。
	● ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差しをしない。 感電やけがをするおそれがあります。
	● お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。 感電やけがをすることがあります。
	● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・火災・発火の原因になります。
	● 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりした状態で保管しない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

⚠ 注意



● **鼻の洗浄以外の目的に使用しない。**

目や耳などに水流を当てると傷害を受けるおそれがあります。



● **以下の場合には使用しないこと。・目、耳、口腔には使用しないこと。**

- ・内耳と耳膜手術後の場合は使用しないこと。
- ・口腔咽頭部損傷または外科手術を受けたばかりの場合は使用しないこと。
- ・耳鼻科及び眼科の疾患がある方や過去にあった方は、専門の医師に相談の上使用する。
- ・鼻腔内に創傷がある場合や塩化ナトリウム代謝障害者と、アレルギー体質がある場合は医師に相談の上、使用すること。
- ・鼻を充分にかめない場合は使用しないこと。
- ・風邪や鼻づまりがひどい時は使用しないこと。



- **使用中に万一、お体(耳・鼻・目など)に何らかの異常や不調が生じたり感じられたときは、直ちにご使用をやめて医師に相談する。**
健康を害する原因になります。



● **高齢者・小児・乳幼児や自分で操作ができない方、鼻の粘膜が弱い方などは使用しない。**

お子様は保護者の指示のもとで使用する。けがの原因になります。

	● 機器を常に清潔にし、鼻の洗浄をするときは、新しい温水を使用する。 不潔な状態で使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。また悪臭や故障の原因にもなります。
	● 使用後は必ずウォータータンクに残った生理食塩水を捨て、ウォータータンクに新しい水を入れ運転して、ノズル、ポンプ内などの塩分をきれいに洗い流す。 塩分をきれいに洗い流さないと塩カスがつまり、噴射しなくなります。不潔な状態で使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。また悪臭や故障の原因にもなります。
	● 電源プラグを抜く時は、電源コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。
	● 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

使用上のご注意


- 本品は原則として同一患者使用のため、他の患者に使用しないでください。交差感染を防止する為に、他の人と共用しないでください。
- 直射日光の当たる所、湿気の多い所、水のかかる所、高温の所での保管はしないでください。

- 本体の汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固くしぼった布でふきとり、シンナーやベンジン等の使用はプラスチック部分を傷めますので、絶対に避けてください。
- 機器を煮沸消毒しないでください。プラスチック部分を傷めます。
- 周囲温度が5℃以下または40℃以上の時は使用しないでください。
- 機器を爆発物、可燃液やガスの近くで使用しないでください。
- お子さまの手の届かない所に保管してください。
- 本品の使用前後は必ず洗浄をすること。
- 本品は屋内での使用を意図しているため、屋外で使わないこと。
- 清潔で風通しが良く、高温、多湿、埃、有毒ガスや腐食性ガスのない環境で使うこと。
- ウォータータンクは、毎回使用後に空にすること。使用後は、ノズルとウォータータンクを洗浄すること。
- 本体は防水構造ではありません。ショート・感電のおそれがありますので水につけたり、水をかけたり、水洗いしないでください。
- ご購入時に本体内部(ウォータータンク等)に水滴が付着していることがありますが、これは性能(水流)テストを行った蒸留水が残っているもので、衛生上問題はありません。

使用目的、効能又は効果

洗浄器として、鼻腔内及び鼻の奥の洗浄を行い、鼻の働きを良くする。花粉症の緩和・アレルギー性鼻炎の緩和・風邪の予防と緩和。一般家庭で使うこと。

商品の構造

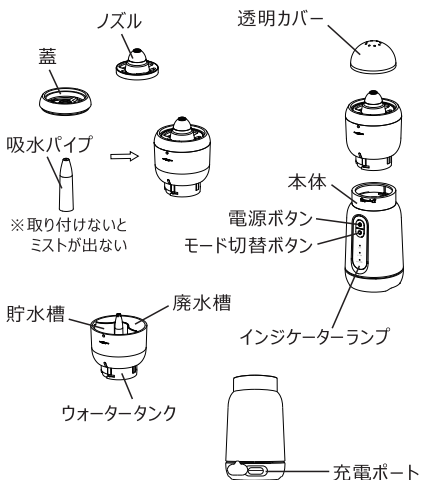

附属品



取扱説明書（本書）

大人用ノズル*2つ

子供用ノズル*2つ



収納袋*1つ



USB充電ケーブル

充電方法

電池残量不足の場合は噴霧が停止され、インジケータランプは素早く点滅します。その場合は充電してからお使いください。ウォータータンクに生理食塩水が残っている場合は生理食塩水を捨て、本体から取り外してから充電してください。

充電前に、充電口に水があるかどうかご確認ください。**水がありましたら、短絡（ショート）の恐れがあります。**

付属の充電ケーブルのType-C側を本体の充電ポートに差し込み、USB側を**市販のACアダプタ（定格出力DC5V 0.5A以上）**に接続してコンセントに差し込んでください。充電中にランプはゆるく点滅します。

充電完了後ランプは常時点灯します。コンセントからACアダプタを取り外し、ケーブルを本体から取り外してください。充電口の保護カバーをしっかりと閉めてください。

- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差しをしないでください。
- 電源ケーブルを抜く時は、ケーブルを持たず必ず先端のUSBプラグを持って引き抜いてください。
- 充電しながら使用しないでください。
- 過充電を防ぐために、必要以上に充電しないでください。また、過放電を防ぐために、長時間使わない場合は3ヶ月に1回充電してください。

使用方法

準備

- (1)初めてご使用になるとき、あるいは長期間使わないで保管されたときは、一度水を通してからご使用ください。
- ※ノズルに異物付着がないことを確認してください。
 - ※本体を水平で安定したところに置きます。
 - ※ノズル、蓋、吸水パイプ、ウォータータンクの組立方法は「商品の構造」をご参照ください。

使い方

(1) 蓋を持ち上げて、吸入パイプを貯水槽に取り付けてから、貯水槽に生理食塩水を注入して蓋を閉める。

※蓋の開き方：蓋を回すのではなく、蓋を持ち上げてください。

※生理食塩水を貯水槽に注入した後、生理食塩水がこぼれないように注意してください。


※0.9%の生理食塩水で洗浄することをおすすめします。または医師の指示のもとに洗浄水を選びください。

※片側の鼻を洗浄する場合通常10-25mlの生理食塩水がかかります。最大容量25mlを超えないようにしてください。


(2) ノズルを装着します。

(3) ウォータータンクを本体に装着します。

▲注意：ウォータータンクに-MAX-表記があります、-MAX-表記ある方向を本体接続部に□のある方向に向けてウォータータンクを装着して、時計回りに回して🔒 ロックしてください。

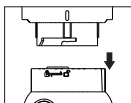

Step-1

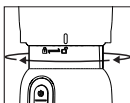

Step-2



Step-3

※正確に装着する図です。

(4) ウォータータンクの廃水槽を内側にしてください。

流された廃水が廃水槽に入るようにします。



廃水槽

鼻洗浄の時に、充電口の保護カバーをしっかり締めてください。水が入ると、充電ができなくなる恐れがあります。



充電口


(5) 洗浄器を持ち上げ、ノズル先端を軽く片側の鼻孔に入れて、🔘 電源ボタンを押すと洗浄が開始します。

流された廃水が廃水槽に入るようにしてください。口で呼吸しながら、ゆっくりとノズルを鼻孔に合わせます。廃水の回収が片鼻から直接にします。

※使用中にもモードが切替できます。

(6) モード切替ボタンを押して、「ソフト」、「ノーマル」、「パルス」モードを切替ます。

※初めての方はソフトモードを推奨します。

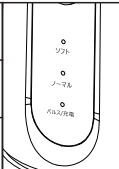ソフトモード ：ゆっくり噴霧する。 流量は約10mL/min (±3mL/min)	
ノーマルモード ：強力噴霧する。 流量は約12mL/min (±3mL/min)	
パルスモード ：1秒間に1回噴霧する。 流量は約7mL/min (±3mL/min)	

(7) 電源ボタンをもう一度押したら洗浄が停止されます。

片側の鼻孔を洗浄した後、もう一方の鼻孔も同じ方法で洗浄します。

※ノズルをくっつくように鼻孔に強く当たらないでください。

※4分間以上連続稼働すると自動で電源OFFになります。

片側の鼻孔を洗浄する時間は4分間を超えないようにおすすめます。



※使用中に万一、耳・鼻・目などに何らかの異常や不調が生じたり感じられたときは、直ちにご使用をやめて医師に相談してください。

※隙間おかず30分間以上連続使用しないでください。

使い終わったら

(1) 電源ボタンを押すと、電源オフになる。ウォータータンクに残留している生理食塩水を捨てます。

(2) ウォータータンクを本体から取り外し、水洗いしてください。洗浄の時にウォータータンクを本体に装着しないでください。水が洗浄器の外側に沿って充電口に入る恐れがあります。水が入ると、充電ができなくなる可能性があります。

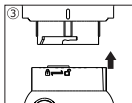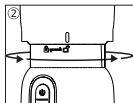

(3) 使用したノズルは適時洗浄と消毒し、徹底的に乾かした後、ノズルを本体にセットして、他の部品と一緒に保管してください。

お手入れ方法

注意：機器の煮沸消毒はしないでください。
各部品をきれいに洗った後、乾燥させてから保管してください。
本体はIP22生活防水程度で、水で洗わないでください。
温度湿度の高いところや直射日光の当たる所に置かないでください。

本体

水洗いできません。
やわらかい布で汚れをふき取ります。
※洗剤、薬品、シンナー、ベンジンなどは故障や部品の割れ・変色などの原因になりますので絶対に使用しないでください。

ノズル

ノズルを本体から取り外し、水洗いしてください。
※水洗い後は、水分をふき取り水をよく切ってください。

ウォータータンク

ウォータータンクを本体から取り外し、水洗いしてください。
※水洗い後は、水分をよく切って乾燥させてください。
※洗剤、薬品や熱湯は衛生上のトラブル故障の原因となります。

主な仕様

販売名	鼻用洗浄器ME107
メーカー	Mediken
分類	一般医療機器
医療機器製造 販売届出番号	13B2X10479302037

電源	リチウムイオン電池内蔵（Type-C充電式）
ACアダプタ	定額出力DC5V 0.5A（市販品）
流量	ソフトモード：10mL/min（±3mL/min）
	ノーマルモード：12mL/min（±3mL/min）
	パルスモード：7mL/min（±3mL/min）
タンク容量	最大25mL（±5mL）
最低霧化 可能薬剤量	2mL
防水性	Ip22
使用環境	温度5℃～40℃
	湿度≤90%
	気圧：70～106kpa
保管環境	温度-10℃～55℃
	湿度≤90%
	気圧：70～106kpa
パッケージ内容	洗浄器本体*1つ 大人用ノズル*2つ 子供用ノズル*2つ 収納袋*1つ 充電ケーブル*1本 取扱説明書*1つ

記号用語集

記号	説明	記号	説明
	Type Bf 適用部品		直射日光を 避けて保存
	天地無用		壊れ物、 取扱 注意
	水漏注意		保護遮断：保護 クラスIIのデバイス
IP22	IP 保護等級		廃棄物処理 ステータス

	製造元		電源ボタン
	医療機器		取扱説明書を 参照してください
	注意事項について取扱説明書を参照してください	— max —	最大容量

保証とアフターサービス

保証規定

1. 取扱説明書に従った使用状態で、保証期間内（本体のみ：1年）に故障した場合に限り品質を保証しております。

万一保証期間内で故障がありました場合は、お客様サービスセンターまたはご購入の販売店にご連絡ください。

2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。

- 2-1 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
- 2-2 取扱い不注意による故障および損傷
- 2-3 不当な修理や改造による故障および損傷
- 2-4 お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
- 2-5 火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
- 2-6 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷
- 2-7 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
- 2-8 暴動・テロ活動・政府による暴動鎮圧活動・内戦国内紛争・戦争・その他不可抗力により発生した故障および損傷
- 2-9 弊社（および弊社関連会社）以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
- 2-10 消耗品、本体以外の付属品の消耗
- 2-11 磨耗や劣化などによる有寿命部品の交換

2-12 保証書のご提示がない場合

2-13 保証書にお買い上げ年月日・お客様名・ご住所・販売店名の記入がない場合

3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

品名または型番	MEDIKEN 鼻用洗浄器 ME107		
販売店名			
注文番号			
お買い上げ日	年 月 日		
	保証期間	本体1年	
お客様名	お名前		
	電話番号		
	ご住所		



LINE公式アカウントを今すぐ友だち追加

☎お気軽にお問い合わせください

■製品のお問い合わせ

■修理のご依頼

■別売品や消耗品のご注文

■初期不良